


**(Ar leanúint taobh istigh)**

- Is gá Feadán Sreabhaidh an Sreabhheadar a choinneáil ingearach agus é á úsáid.
- Ní cead ag éinne ach pearsanra oille treoraíche ar an Sreabhheadar úsáid a bhaint as.
- Is gá cinntiú go bhfuil gach nasc chung agus gan sceitheadh. Ná bain úsáid as an brathadóir sceitheadh mura bhfuil sé comhoiriúnach don ocsaigín.
- NÁ steiriligh go huathoibríoch.
- NÁ steiriligh le ETO (ocsaid eitilín).
- NÁ grian le hidreacarbóin aramatacha.
- NÁ tum an Sreabhheadar i leacht ar bith. Cuirfidh sé sin an baránta ar neamhní.
- D'fhéadfadh le srántán a bheith réamhsocráithe ar na Sreabhheadar 1MFA3001, 4MFA1001 agus 6MFA1001. Déan lipéad an Sreabhheadar a sheiceáil mar gheall ar srántacht sreabhach sula mbaineann tú úsáid as.
- D'fhéadfadh leis an Feadán Sreabhaidh ar na Sreabhheadar 1MFA3001, 4MFA1001 agus 6MFA1001 a bheith déanta le gloime, agus sobhríte dá bharr. Is gá a bheith cúramach go leor gan an Feadán Sreabhaidh a bhriseadh.



- Bain úsáid as an Sreabhheadar de réir an "Úsáid mholta", mar atá sa lámhleabhar seo.
- Is gá breathnú ar an sreabhach ordaithe GACH VAIR go bhfuil tu chun é a thabhairt don othar, agus is gá an sreabhach a fhiosrú go mínic.
- D'fhéadfadh le hábhair mhaingéadacha nó feiriúla a bheith ar an Sreabhheadar, agus d'fhéadfadh éifeacht a bheith acu ar na forthar MRI.
- Chun baol tine nó pléascadh a sheachaint:
- Bí comhlíontach GACH VAIR leis na caighdeáin ag ANSI agus CGA ar Gáis Leighis agus Sreabhheadar agus Ocsaigín a Láimhséil.
- NÁ bain úsáid nó cuir ola, gréisc, bealaídh orgánacha nó ábhair indite ar an Sreabhheadar nó in aice leis.
- NÁ bain úsáid as an Sreabhheadar in aice le ábhair nó gáis nó atmaisféir so-lasta/pléascacha.
- NÁ bí ag cailteamh tobac san áit ina bhfuil an ocsaigín á thabhairt.

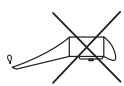

Siombal ar "NÁ CUIR OLA"

Treoracha Úsáide



Léiríonn sé cúlse a d'fhéadfadh a bheith contúirteach agus a bheith de thoradh ar ghortú trom nó an bháis, mura ndéantar é a sheachaint.

Léiríonn sé cúlse a d'fhéadfadh a bheith contúirteach agus a bheith de thoradh ar ghortú éadrom nó meánach, mura ndéantar é a sheachaint.

Mura bhfuil siombail aire ann, léiríonn sé cúlse a d'fhéadfadh a bheith contúirteach agus a bheith de thoradh ar damáiste ar an airméis, mura ndéantar é a sheachaint.

**EOLAS SLÁNDALA - FOLÁIREAMH AGUS RABHADH**

**TU ÚSÁID ASTU**  
Tá treoracha do profiúisúnaigh leighis ar fáil sa lámhleabhar seo chun an Sreabhheadar a shuiteáil agus a úsáid. Is aidhm leis na treoracha seo sábháilteacht a chinntiú agus damáiste ar an Sreabhheadar a sheachaint. Mura n-éiríonn leat ciall a bhaint as an lámhleabhar seo, NÁ BAIN ÚSÁID as an Sreabhheadar agus déan teagmháil leis an soláthraí.

**LEIGH NA TREORACHA AR FAD SULA MBAINNEANN**  
Léiríonn sé cúlse a d'fhéadfadh a bheith contúirteach agus a bheith de thoradh ar ghortú trom nó an bháis, mura ndéantar é a sheachaint.

**ÚSÁID MHOILTA**  
Moltar do lianna, teiripeoirí riospráidí agus pearsanra ospidéal eile an Sreabhheadar a úsáid chun dalíeoga gáis leighis a thabhairt don othar. damáiste éigin air, agus déan teagmháil leis an soláthraí sa chás sin.

**PACÁISTE / INIÚCHADH**  
Bain an Sreabhheadar de chuid Maxtec as an phacáiste agus déan iniúchadh ar damáistí. NÁ BAIN ÚSÁID as an sreabhheadar má tá

**LÁMHLEABHAIR AN ÚSÁIDEORA**

**SREABHMHÉADAR**

**SAMHLACHA:**

**1MFA, 4MFA, 6MFA agus 8MFA Series**



**1MFA1001**  
(Taispeánaithe)



**8MFA1001**  
(Taispeánaithe)

**DÉAN NA TREORACHA SEO A SHÁBHÁIL**



De réir an dlí feidearálach (SAM) is gá don fheiste seo a bheith ordaithe ag lia chun a bheith díolta.



2305 South 1070 West  
Salt Lake City, UT 84119 USA  
**Deimhnithe ag ISO 13485**

Fón: (+001) 800-748-5355  
Facs: (+001) 801-973-6090  
www.maxtec.com

### BARÁNTA TEORANTA AGUS TEORAINN AR AN DLITEANAS

Tugann Maxtec barántas duit go bhfuil an Sreabhheadar gáis leithis (an earra) gan fabht ar bith ó thaobh saoirseachta nó ábhair ar feadh an tréimhse a leanas:

(a) Feadáin Sreabhaidh agus Feireadh	Ré an earra
(b) Comhla shnáthaide	Cúig (5) bhliain ón lá seoladh
(c) Gach páirt eile	Bliain (1) ón lá seoladh

Sreabhheadar gáis gan aithint ar (a) nó (b) thuas

Ní bhaineann an baránta le briseadh / mí-úsáid.

Mura bhfuil an earra á comhlíonadh leis an baránta seo ar feadh an tréimhse léirithe thuas, déanfaidh Maxtec, tráth nóta scríofa a léiríonn go raibh sé stóráilte, súiteáilte, coiméadta agus úsáidte de réir na treoracha atá ag Maxtec agus an ghnáth-úsáid tionsclaíochta, agus nach bhfuil athrú, athchur nó athdhéanamh déanta ar an earra, é a dhéisiú saor in aisce duit.

**NÍ BHAINEANN BARÁNTA LE RÁITEAS Ó BHÉAL.**

Ní cead ag aon ionadaí de chuid Maxtec baránta ó bhéal a thabhairt duit le haghaidh an earra atá léirithe sa chonradh seo, agus níl baint ag an ráiteas ó bhéal sin leis an díolachán ar chor ar bith. Dá bhrí sin, is ráiteas an scríbhinn seo atá cinntitheach, iomlánaigh agus eisiach ag na téarmaí an chonradh.

**TÁ AN BARÁNTA SEO EISIACH AGUS TÁ SÍ IN IONAD GACH BARÁNTA DIOLACHÁIN, FEILIÚNACHT AR CHUSPÓIR FAOI LEITH NÓ BARÁNTA AR BITH EILE AR CHÁILÍOCHT, RÁITE NÓ INTUIGTHE.**

Ní bheith Maxtec freagrach as damáistí speisialta, timpisteach nó iarmartach ar chor ar bith - cailteanas, díolachán tubaisteach, gortú ar dhuine agus damáiste ar an airméis san áireamh. I gcás nach bhfuil comhlíonadh mar atá léirithe thuas, beidh an ceartúchán de réir gach dliteanas ag Maxtec, ar bhonn conradh, failli, sracadh nó eile. Tá an ceart ag Maxtec déantús earraí a chur ar ceal nó athrú a dhéanamh ar an dearadh, ábhar nó sonraíochtaí gan fógra a thabhairt faoi.

Tá an ceart ag Maxtec botúin cleiriciúla nó litriú a cheartú gan pionós.

# SONRAÍOCHTAÍ

Raon Sreafa	Grádú	Cruinneas
0 – 200 cc	20 cc (0-200)	0-100 cc ±10 cc 101-200 cc ±14 cc
0 – 1 l/nóim	.1 (0-1) l/nóim	0-1 ±.05 l/nóim
0 – 3.5 l/nóim	.125 (0-1) l/nóim .25 (1-3.5) l/nóim	0-3.5 ±.15 l/nóim
0 – 5 l/nóim	.25 (0-5) l/nóim	0-5 ±.20 l/nóim
0 – 6 l/nóim	.5 (0-6) l/nóim	0-6 ±.50 l/nóim
0 – 8 l/nóim	.5 (0-8) l/nóim	0-8 ±.25 l/nóim
0 – 15 l/nóim	.5 (0-5) l/nóim 1 (5-15) l/nóim	0-5 ±.25 l/nóim 6-15 ±.50 l/nóim
0 – 26 l/nóim	1 (2-26) l/nóim	2-4 ±.50 l/nóim 5-26 ±10% léitheoireacht
3 - 35 l/min	1 (3-15) l/min 5 (5-35) l/min	3-4 ±.50 l/min 5-35 ±10% léitheoireacht
0 – 70 l/nóim	5 (0-70) l/nóim	0-70 ±10% léitheoireacht

**Sreabhadh Comhréidh:** aschur an Sreabhmheadair nuair atá an léitheoir sreafa thar an grádú is airde. Tá raon an Sreabhadh Comhréidh léirithe sa lipéid an Sreabhmheadair.

**Riachtanas Iompair / Stóir** -40°F (-40°C) to 140°F (60°C)

Tá an brú gáis agus ionraon léirithe ar chorp an Sreabhmheadair nó an Feadán Sreabhaidh.

**NÓTA:** D'fhéadfadh leis an iompair / stóir atá difriúil ón raon sonraithe damáiste a dhéanamh ar an Sreabhmheadair.

Tá an éifeacht ar an gcruinneas sreafa mar gheall ar athruithe sa theocht comhthimpeallach cothrom le cruinneas caighdeánach +7.3% @ 32°F (0°C) agus -3.0% @ 104°F (40°C).

Tá na samhlacha Sreabhmheadair thuas calabraithe ar an bhrú ionraon, 70°F (21°C), brú atmaisféarach caighdeánach. Bíonn na samhlacha idirnáisiúnta calabraithe de réir na sonraíochtaí atá léirithe sa chorp an Sreabhmheadair nó an Feadán Sreabhaidh.

D'fhéadfaí linn athruithe a dhéanamh ar na sonraíochtaí gan fógra a thabhairt roimh ré.

**Chun an athbhreithniú is déanaí ar an lámhleabhar a fheiceáil, breathnaigh ar ár suíomh gréasáin: [www.maxtec.com](http://www.maxtec.com)**

Abair linn cad a cheapann tú fuínn! Breathnaigh ar [www.maxtec.com](http://www.maxtec.com)

## TREORACHA ÚSÁIDE

### RABHADH

Léigh an lámhleabhar seo sula ndéanann tú an Sreabhmheadair a shuiteáil nó a úsáid.

### AIRE

Déan iniúchadh ar an Sreabhmheadair le haghaidh damáiste. NÁ BAIN ÚSÁID as má tá damáiste air.

**NÓTA:** Molann Maxtec úsáid a bhaint as cannúl rocdhíonach.

1. Cas an cnoba chun é a chur ar an "OFF".
2. Ceangail an Sreabhmheadair leis an fhoinsé gáis oiriúnaí. Tá tagairtí ar an gás agus brú is oiriúnaí ar chorp an Sreabhmheadair nó Feadán Sreabhaidh.
3. Féach ar an Liathróid Snámhain chun cinntiú go bhfuil sí ar chúl an Feadáin Sreabhaidh.

**NÓTA:** Mura bhfuil an liathróid ar chúl an Feadáin Sreabhaidh, ciallaíonn sé sin go bhfuil an ábhar ag sceitheadh. Breathnaigh ar na treoracha "FABHTCHEARTÚ" sa chás sin.

4. Sreabhadh a shocrú:  
Chun é a **chur i méid** - Cas an cnoba **go tuathalach**  
Chun é a **laghdú** - Cas an cnoba **ar deiseal**
5. Chun an sreabhadh a shocrú, ailínigh lár an Liathróid Snámhain leis na línte treoracha atá ar an bhFeadán Sreabhaidh.
6. Má dhéanann tú an sreabhadh a shocrú thar an líne treoracha is airde, tarlóidh sreabhadh neamhchinnithe.
7. Chun an t-uasmhéid sreabhadh comhréidh a fháil, cas an cnoba go tuathalach an bhealach ar fad.

**NÓTA:** Sreabhadh comhréidh: sreabhadh ar bith atá thar an líne treoracha is airde ar an Feadán Sreabhaidh, gan cosc ar an sreabhadh, mar atá léirithe sa lipéid an Sreabhmheadair.

## AIRE

- **NÁ** tean an cnoba an iomarca agus é á mhúchadh. Déanfaidh sé sin damáiste ar an Sreabhmheadair.
- Má tá an brú difriúil ón brú mholta ar chorp an Sreabhmheadair nó Feadán Sreabhaidh, d'fhéadfadh éifeacht a bheith aige ar chruinneas an sreabhadh.
- Má tá an teocht difriúil ó 70° F (21°C), d'fhéadfadh éifeacht a bheith aici ar an sreabhadh mholta.
- Má tá oiriúintí ceangailte leis an asraon (a chuirfeadh friotaíocht in aghaidh sreabhadh asraoin i méid) d'fhéadfadh leis an sreabhadh a athrú ach ní tharlóidh athrú ar chruinneas an sreabhadh.
- NÁ BAIN ÚSÁID ACH as feistí oiriúnaí do gáis chun an Sreabhmheadair a cheangal le foinsé gáis. Bain úsáid as nascanna ocsaigine ar Sreabhmheadair ocsaigine, agus nascanna aeir ar Sreabhmheadair aeir.
- NÁ déan iarracht Sreabhmheadair 8MFA a dheisiú. Níl páirt spártha ar fáil.

## TREORACHA GLANTA

1. Dícheangail gach nasc sula ndéanann tú é a ghlanadh.
2. Glan an dromchla eachtrach an Sreabhmheadair le hédach ar a bhfuil beagán uisce agus glantach mín.
3. Triomaigh le hédach glan.

## FABHTCHEARTÚ

Má tá mífheidhm ar an Sreabhmheadair, déan teagmháil leis an soláthraí nó Maxtec.

Fadhb	Cúis is dochúlá	Réiteach
Níl sé á mhúchadh	• Sceitheadh • Comhla fabhtach	• Déan an Tetriseal nó an feireadh a achur. • Déan an chorp a achur
Liathróid Snámhain ag greamú	• Déan smionagar ar an bhFeadán Sreabhaidh	• Glan Feadán Sreabhaidh agus Liathróid Snámhain
Ní féidir an sreabhadh a shocrú	• Ionraon stoptha	• Déan an chorp a achur
Ní féidir an cnoba a chasadh	• Comhla stalctha	• Déan an chorp a achur

**NÍL páirt spártha ar fáil do na samhlacha 8MFA.**

## EARRAÍ AR AIS

Is gá uimhir RGA (údarú earraí ar ais) a bheith agat chun earraí a sheoladh ar ais. Chun earraí a sheoladh ar ais chuig Maxtec is gá duit iad a chur i mbosca séalaithe chun damáiste a sheachaint. Ní bheith Maxtec freagrach as damáistí a dhéantar ar an mbealach ar ais. Tá ár bPolasaí Aisúchithe ar fáil san Idirlión ar [www.maxtec.com](http://www.maxtec.com).

Liosta Páirteanna Athsholáthair  
ar fáil ar an idirlión:  
[www.maxtec.com](http://www.maxtec.com)



Maxtec  
2305 South 1070 West  
Salt Lake City, UT 84119 USA

